

MASIMO Rad-5v™

La precisión y fiabilidad de la pulsioximetría de Masimo SET en un dispositivo compacto, perfecto para verificación rápida y evaluación inmediata

- > Se ha demostrado clínicamente que la tecnología Masimo SET® ofrece mediciones de pulsioximetría precisas durante condiciones de movimiento y baja perfusión
- > Dispositivo portátil, cómodo y liviano, con batería de larga duración
- > FastStart™ permite una medición rápida al encendido
- > La barra Signal IQ (SIQ®) proporciona la identificación de la señal e indica la calidad en situaciones de movimiento y con baja relación señal-ruido
- > El índice de perfusión (PI) indica la fuerza de la señal del pulso arterial y ayuda a la selección del lugar
- > Múltiples opciones de sensor diseñadas para distintas aplicaciones clínicas
- > Las luces indicadoras de la batería ofrecen una notificación visual de la energía




Masimo Rad-5v

CARACTERÍSTICAS




La barra Signal IQ® (SIQ) proporciona una identificación de la señal e indica la calidad en situaciones de movimiento y con baja relación señal-ruido. El LED sube y baja junto con el pulso y su altura indica la calidad de la señal. Cuando Signal IQ es muy baja y los valores de SpO₂ y de frecuencia cardíaca son sospechosos, el LED se vuelve de color rojo (gráfico izquierdo).

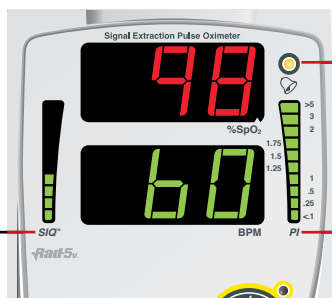

El indicador de estado de alarma parpadea cuando existe una condición de alarma.

El índice de perfusión (PI) indica la fuerza de la señal del pulso arterial. La barra de LED es más alta y de color verde cuando la calidad del lugar perfundido es el mejor; si el PI es deficiente, la barra de LED es baja y se vuelve de color rojo (gráfico derecho).

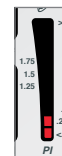

Disponemos de fundas protectoras en siete colores diferentes.

DESEMPEÑO

Rango de medición

SpO ₂	1 – 100%
Frecuencia cardíaca	25 – 240 (lpm)
Perfusión	0,02% – 20%

Resolución

Saturación (% de SpO ₂)	1%
Frecuencia cardíaca (lpm)	1 lpm

Precisión de la saturación de oxígeno arterial (70% a 100%)

	Sin movimiento	Movimiento	Perfusión baja
Neonatos	±3%	±3%	±3%
Pediátricos	±2%	±3%	±2%
Adultos	±2%	±3%	±2%

Precisión de la frecuencia cardíaca (25 - 240 lpm)

	Sin movimiento	Movimiento	Perfusión baja
Neonatos	±3 lpm	±5 lpm	±3 lpm
Pediátricos	±3 lpm	±5 lpm	±3 lpm
Adultos	±3 lpm	±5 lpm	±3 lpm

ESPECIFICACIONES

Producto

Modo de funcionamiento	Verificación rápida
------------------------------	---------------------

Aspectos eléctricos

Tipo	4 alcalinas AA
Capacidad	más de 30 horas

Aspectos ambientales

Temperatura de funcionamiento	32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)
Temperatura de almacenamiento	-40 °F a 158 °F (-40 °C a 70 °C)
Humedad de funcionamiento	5% a 95%, sin condensación
Altitud de funcionamiento	presión de 500 mbar a 1.060 mbar -1.000 pies a 18.000 pies (-304 m a 5.486 m)

Características físicas

Dimensiones	6,2"x 3,0"x 1,4" (15,8 cm x 7,6 cm x 3,6 cm)
Peso	13 onzas (0,32 kg)

Modos

Modo de promediación	8 segundos
Sensibilidad	Normal

Alarmas

Alarmas de condición del sensor, falla del sistema y batería baja	
Prioridad alta	Tono de 799 Hz, ráfagas de 5 de pulsos, separación de pulso: 0,250 s; 0,250 s; 0,500 s; 0,250 s; tiempo de repetición: 10 s
Prioridad baja	Tono de 432 Hz, 3 pulsos, tiempo de repetición: 5 s
Volumen de la alarma	Prioridad alta: 75 dB (máx.), Prioridad baja: 75 dB (máx.)

Pantalla/indicadores

Pantalla de datos	% SpO ₂ , frecuencia cardíaca, índice de perfusión, estado de alarma, estado de alarma en silencio, barra Signal IQ/pletismografía, barra de índice de perfusión, estado de la batería
Tipo	LED

Cumplimiento

Clasificación EMC	IEC 60601-1 2, Clase B
Clasificación del equipo	IEC 60601-1-1/UL 60601-1
Tipo de protección	Con energía interna (a baterías)
Grado de protección; cable del paciente	Tipo BF, parte aplicada
Modo de funcionamiento del Rad-5v	Verificación rápida